



简约版用户手册

1、正面图

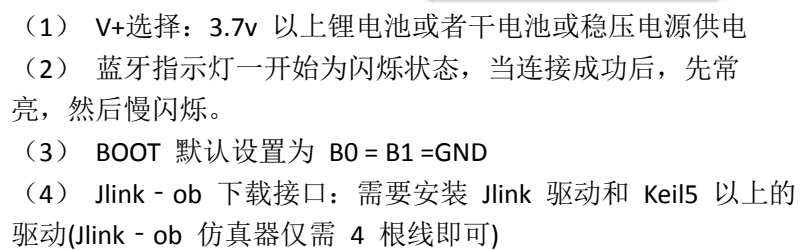

2、反面图

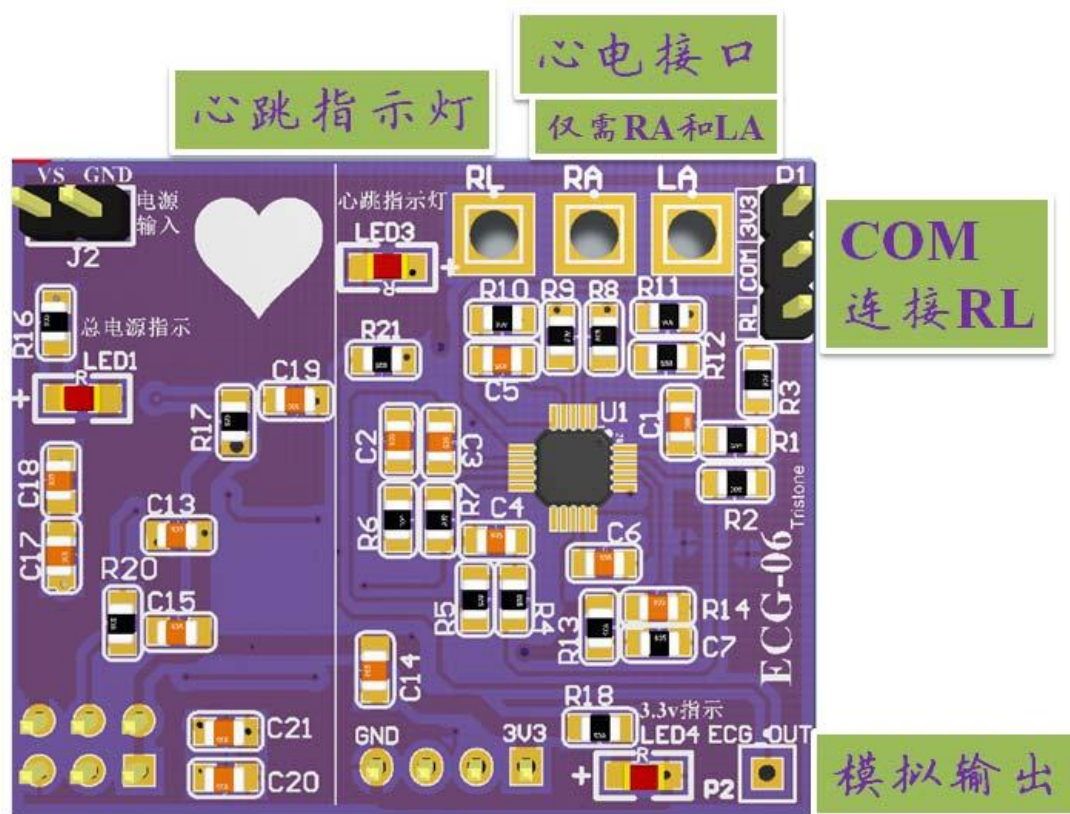

- (1) 这里有一个 3.3v 电源指示灯
 - (2) 只需要 LA 连接左手(或左肩下)，RA 连接右手（或右肩下）即可, 当带 RL 时，须接右手（或右腹部）
- 小注：当 com 连接至 RL 时，不需要连接 RL 线路


(3) 心电模拟输出口：
 可以通过示波器观察原始信号，不同人干扰大小不同，被测人的皮肤最好湿润，降低接触阻抗。
 注意：坐姿或者站姿会产生肌电干扰，平躺时会减弱很多。

二、软件使用说明

- (1) 将 APK 安装到 Android 手机上。
- (2) 打开手机的蓝牙，并且与开发板蓝牙配对，pin: 1234。
- (3) 打开 APP，点击“连接蓝牙”，选择刚才配对的蓝牙。
- (4) 将采集板按照如下的方式连接，并且打开开关。
- (5) 按照下图方式，将夹板夹于手腕，保持坐姿端正，也可以使用平躺的方式。

关于减轻外界干扰对波形的影响：

1. 要求坐姿垂直，不弯腰，当然也可以平躺。
2. 在手腕于金属片接触的皮肤上涂上纯净水或者酒精，增强接触性能。

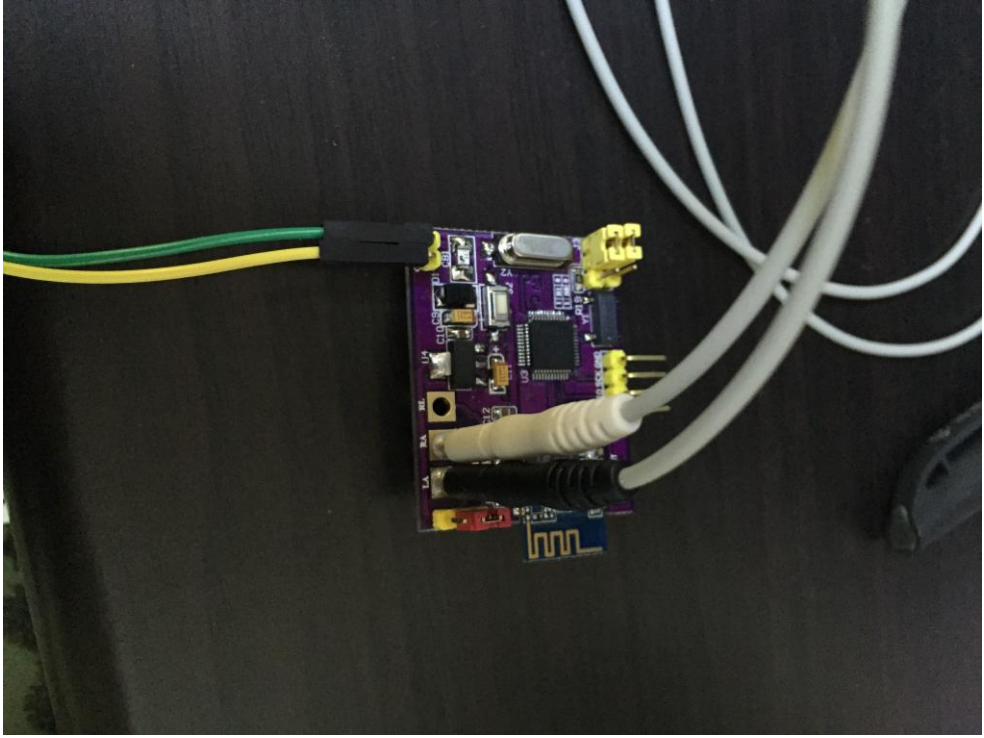



采集正常时波形应该有如下效果：

